

## تست بویدیک (BDS- Test)




قبل از استریلیزاسیون



تست پاس شده بعد از استریل موفق

- ✓ خروج هوا، وکیوم کافی، نفوذ بخار، کیفیت بخار و دما و فشار مناسب جهت استریلیزاسیون را کنترل و تایید می کند.
- ✓ تغییر رنگ از آبی به مشکی نشان دهنده ی این است که سیکل استریل به طور صحیح انجام شده
- ✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی **ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867**
- ✓ این تست با به چالش کشیدن عملکرد دستگاه اتوکلاو سخت ترین شرایط برای تایید سیکل استریل و بامانیتورینگ نفوذ کیفیت بخار، وکیوم دستگاه و خروج هوا، دما و زمان و فشار استریل را چک می کند.

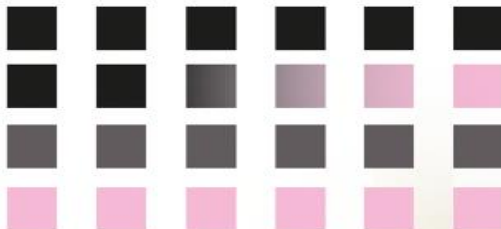

تست پاس شده: دما، زمان و نفوذ بخار عالی است

تست پاس نشده: وکیوم هوا و نفوذ بخار مشکل دارد

تست پاس شده: دما مناسب اما وکیوم و نفوذ بخار عالی نیست توصیه به تکرار

تست پاس نشده: دما، زمان و نفوذ بخار مشکل دارد



تلفن دفتر تهران: ۰۲۱)۶۶۱۵۷۶۰۹ / دفتر شهرستان: ۰۲۵)۳۲۸۹۱۵۷۳-۳۶۵۵۰۱۷۸ / فکس: ۰۲۵)۳۶۵۵۰۱۶۶

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)