


Helix System Test in PCD

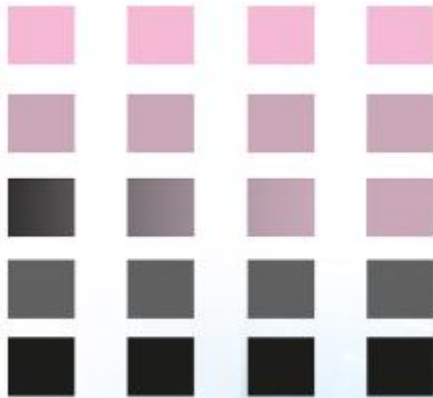

تست پاس نشده: دما، زمان و نفوذ بخار مشکل دارد.

تست پاس نشده: وکیوم هوا و نفوذ بخار مشکل دارد.

تست پاس نشده: دما مناسب اما وکیوم هوا و نفوذ بخار کافی نیست.

تست پاس شده: دما و نفوذ بخار مناسب، وکیوم هوا عالی نیست.

تست پاس شده: دما، زمان و نفوذ بخار عالی است.

✓ خروج هوا، وکیوم کافی، نفوذ و کیفیت بخار جهت مانیتورینگ هر سیکل استریلیزاسیون را کنترل و تایید می کند.

✓ تغییر رنگ از صورتی به مشکی نشان دهنده ی این است که سیکل استریل به طور صحیح انجام شده است.


✓ مطابق استاندارد EN ISO 11140 برای تایید هر سیکل استریل بکار می رود.

✓ این تست با به چالش کشیدن عملکرد دستگاه اتوکلاو سخت ترین شرایط برای تایید سیکل استریل را چک می کند.

✓ بالاترین اطمینان از کیفیت محصول با تاییدیه کنترل کیفیت جهانی ISO 13485 & ISO 9001:2008 & ISO 11140-1 & EN 867



قبل از استریلیزاسیون

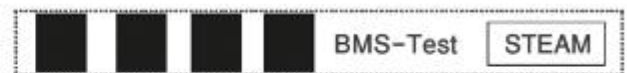

تست پاس شده بعد از استریل موفق



تلفن دفتر تهران: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ / دفتر شهرستان: ۰۳۶۵۵۰۱۷۸ - ۰۳۲۸۹۱۵۷۳ / فکس: ۰۳۶۵۵۰۱۶۶ (۰۲۵)

تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۲۲۱۴۶۰ (خانم مهندس یعقوبی راد) - ۰۹۱۲۵۵۳۷۶۳۰ (آقای مهندس اویسی)